

MANUMAX EXAMEN



UN NOUVEAU STANDARD EN PHYSIOTHÉRAPIE



UNE PREMIÈRE MONDIALE DANS
LE DOMAINE DES TABLES DE
TRAITEMENT AVEC LA NOUVELLE
COLLECTION
MANUMAX D'ENRAF-NONIUS



ENRAF-NONIUS B.V.

Vareseweg 127
3047 AT Rotterdam
Les Pays-Bas
T: +31-(0)10 - 203 06 00
E: info@enraf-nonius.nl
www.enraf-nonius.com

MANUMAX

MANUMAX EXAMEN

UN NOUVEAU STANDARD EN PHYSIOTHÉRAPIE

UNE STABILITÉ ET UNE ROBUSTESSE INÉGALÉES

Innovations technologiques, robustesse et design contemporain sont concentrés dans ce nouveau concept de tables de traitement ManuMax.

Le concept ManuMax d'Enraf-Nonius est une collection de tables d'examen et de traitement de nouvelle génération, imaginé par nos spécialistes et experts, pour établir un nouveau standard en Physiothérapie.

Un nouveau châssis a été spécialement conçu et développé pour apporter à l'ensemble de la ligne de tables ManuMax, une stabilité et une robustesse inégalées.

PUISSANCE ÉLEVÉE DU MOTEUR

Tous les modèles de la ligne de tables ManuMax sont équipés en standard d'un moteur 10 000 Newton qui permet de traiter également les patients les plus lourds, jusqu'à 250 kg.

La puissance élevée du moteur garanti un réglage rapide (min - max : 18 s) et silencieux de la hauteur de travail, et confère à la ManuMax une accessibilité et une utilisation optimales pour le traitement des personnes âgées ou à mobilité réduite (hauteur minimale de 48 cm).



MANUMAX EXAMEN

AVEC SON DESIGN ÉLÉGANT ET MODERNE, LA MANUMAX EST UN ATOUT SÉDUISANT POUR CHAQUE PRATIQUE

NOUVELLES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

Un nouveau système de mise sur roulettes centralisé asservi par vérin à gaz, a été élaboré pour permettre un déplacement rapide et aisé de la ManuMax, sans effort pour le thérapeute.

La Collection ManuMax est équipée d'un interrupteur de sécurité électronique qui permet de verrouiller la table lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Grâce à toutes ses nouvelles innovations technologiques alliées à son design contemporain, la Collection ManuMax offre un confort absolu pour les patients et les thérapeutes dans leur pratique quotidienne.

La configuration de la table ManuMax ne nécessite pas d'options supplémentaires car elle correspond parfaitement à vos besoins quel que soit la taille, la stature et le poids de vos patients.

LA MANUMAX

- ☑ STABILITÉ INÉGALÉE
- ☑ DESIGN CONTEMPORAIN
- ☑ CONFORT ABSOLU



M A N U M A X TM
BY ENRAF NONIUS

MANUMAX

MANUMAX EXAMEN

LA MANUMAX EXAMEN 2.2

Le modèle ManuMax Examen 2.2 est une table 2 parties pour les examens médicaux et les traitements de base en Physiothérapie.

Ce modèle de grande dimension (215 cm de longueur) conçu par rapport aux données anthropométriques actuelles, vous permet de traiter vos patients quel que soit leur taille, leur stature ou leur poids, et cela pendant de très nombreuses années.

Ce modèle est équipé d'un grand dossier d'une longueur de 98,5 cm avec un trou visage triangulaire, et réglable de 0 à 90 ° par vérin à gaz.



La ManuMax Examen 2.2 est par conséquent très confortable, même pour les patients de grande taille ou de forte corpulence.



MANUMAX EXAMEN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions des plateaux (Lxl)	215 x 67 cm
Hauteur réglable	environ 48-96 cm
Temps de montée (min.-max.)	environ 18 sec.
Capacité de montée	250 kg (dynamique)
Voltage du réseau	100-240V ~ 50/60 Hz
Consommation du courant	2.5 A max.
Nuancier de couleurs	204 Sirius bleu
	012 Noir
	170 Bleu ciel
Couleurs d'inserts de châssis	Clair
	Foncé

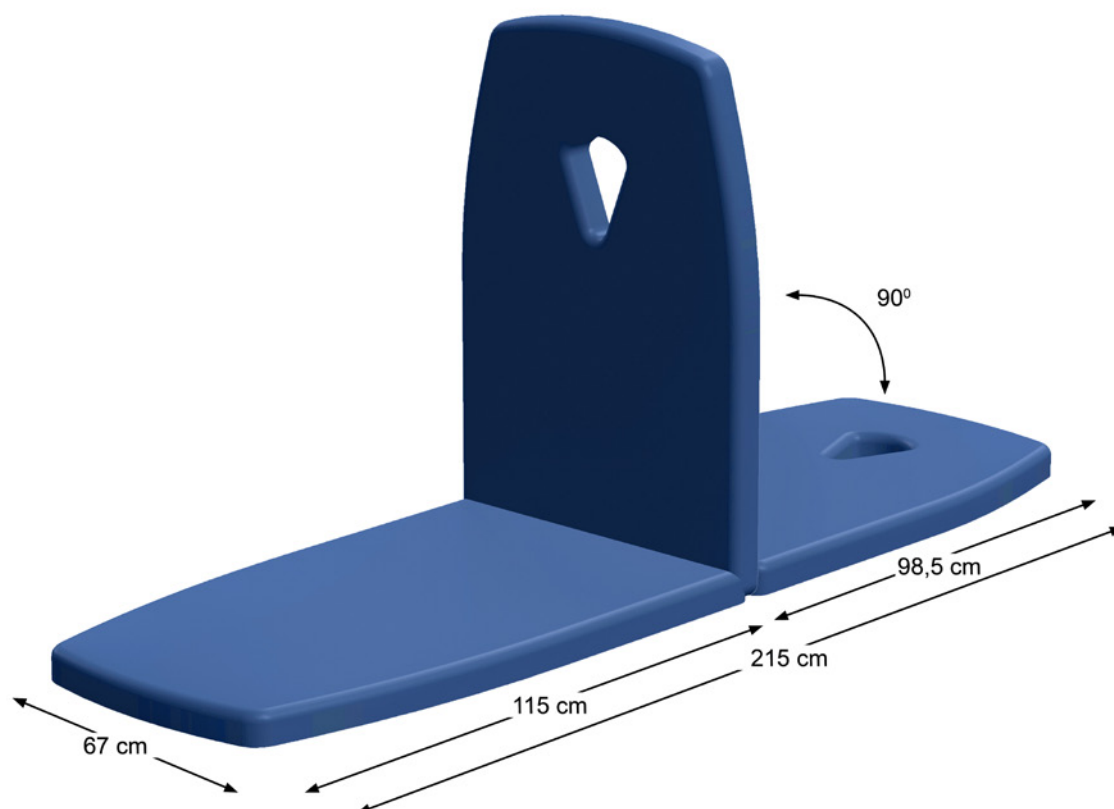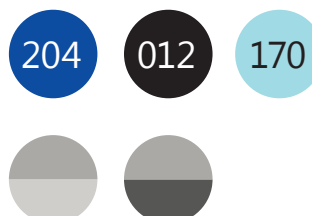

CONÇUE PAR ENRAF-NONIUS, VOTRE "PARTNER FOR LIFE"

La ManuMax a été conçue par Enraf-Nonius, votre partenaire privilégié pour les produits de pointe destinés aux secteurs de la physiothérapie et de la rééducation.


MANUMAX EXAMEN

PORTE ROULEAU ET PAPIER

1570800	Porte rouleau pour la ManuMax
3445280	Distributeur sur pied (indépendant)
3445278	Rouleaux papier, largeur 50 cm, longueur 150 m, par 5




1570800

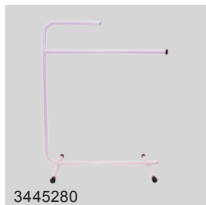

3445280



3445278

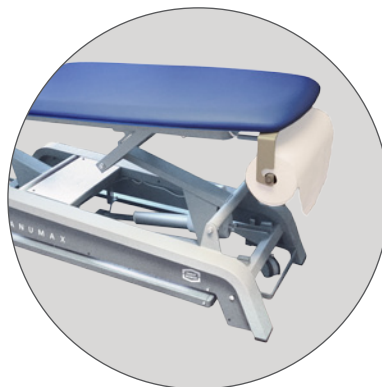

M A N U M A X TM

BY ENRAF NONIUS

TABOURETS (DISPONIBLES EN DIFFÉRENTES COULEURS)

3xxx010	Tabouret, hauteur réglable 40-53 cm
3xxx011	Tabouret, mobile, hauteur réglable 59-85 cm
3xxx012	Tabouret, mobile, avec repose pieds, hauteur réglable de 59-85 cm
3xxx013	Tabouret mobile, siège anatomique, hauteur réglable de 43-56 cm
3xxx020	Tabouret mobile, siège selle, hauteur réglable de 59-85 cm



3xxx010



3xxx011



3xxx012



3xxx013



3xxx020

012

204

170

COUSSINS ET ROULEAUX

3xxx002	Coussin demi-cylindrique, petit, spécial cheville ⁽¹⁾	28x9x11 cm
3xxx003	Coussin demi-cylindrique, large ⁽¹⁾	56x16x18 cm
3xxx023	Rouleau de massage ⁽¹⁾	50x Ø15 cm
3xxx004	Coussin de nuque, forme sablier ⁽¹⁾	30x15 cm
3xxx005	Coussin de massage ⁽¹⁾	30x28x8 cm
3xxx015	Coussin de table triangulaire ⁽¹⁾	50x30x15 cm
1550813	Obturateur pour fente nasale, forme triangulaire (uniquement en noir)	16,5 x 21 cm
3445297	Coussin triangulaire caoutchouc, Kaltenborn (uniquement en noir)	22,5 x 10,5 x 8,5
3446161	Sac de sable pour posture 1,2 kg ⁽²⁾	15x25 cm
3446162	Sac de sable pour posture 2 kg ⁽²⁾	18x27 cm
3446166	Sac de sable pour posture 4 kg ⁽²⁾	25x35 cm
3446167	Sac de sable pour posture 7 kg ⁽²⁾	30x45 cm

⁽¹⁾ = Disponible en différentes couleurs, certaines couleurs seront supprimées. Disponible jusqu'à la fin de stock.

⁽²⁾ = Disponible en coloris gris uniquement



3xxx002



3xxx003




3xxx023



3xxx004



3xxx005

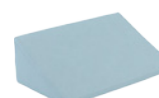

3xxx015



1550813



3445297



3446161



3446162



3446166




3446167

HOUSSES DE TABLE

3445240	Housse, avec ouverture pour le nez	bleue
3445242	Housse, avec ouverture pour le nez	blanche
3445249	Housse, avec ouverture pour le nez	gris foncé
3445250	Housse, avec ouverture pour le nez	bleu royal
3445261	Housse, sans ouverture pour le nez	bleue
3445267	Housse, sans ouverture pour le nez	blanche
3445248	Housse, sans ouverture pour le nez	gris foncé
3445247	Housse, sans ouverture pour le nez	bleu royal
3445259	Sangles élastiques pour les housses de table avec pinces aux deux extrémités, ensemble de 3	




3445240 / 3445261

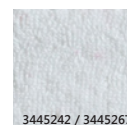

3445242 / 3445267



3445248 / 3445249

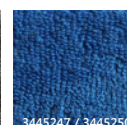

3445247 / 3445250



3445259